

Sua
solução prática


às necessidades em vestuários
para segurança e higiene

Máscara de Proteção Respiratória

PFF2 *Classe S*



**Possui 4
camadas**

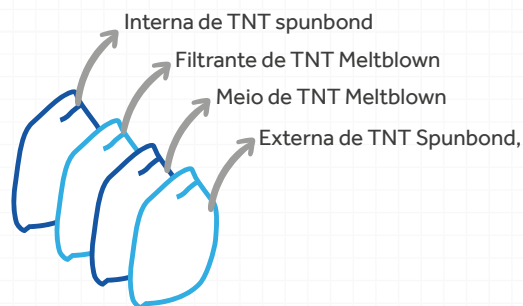

Descrição

O respirador é um Equipamento de Proteção Individual que cobre boca e nariz. Proporciona uma vedação adequada sobre a face do usuário e possui filtro eficiente para retenção dos contaminantes presentes na forma de aerossóis e de líquidos a base de água. Peça semifacial filtrante para partículas, Classe "S" PFF 2 - Contra poeiras, névoas e fumos, Eficiência de filtragem de partículas (EFP) $\geq 98\%$, Eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) $\geq 95\%$, Sem válvula de exalação. Formato dobrável, Cor Branco na parte interna e Branco na parte externa.

"NÃO ESTÉRIL"

Importado e Distribuído por:



DISTRIBUIDORA,
IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA.

Importadora Oficial: Crown Name

+55 (11) 3809-6870

comercial.crownname@dorte.com.br

sac.crownname@dorte.com.br

dorte.com.br/crownname

INDICAÇÃO DE USO

Proteção das vias respiratórias dos trabalhadores da área da saúde contra exposição de agentes biológicos causadores de tuberculose, rubéola, SARS/SRAG varicela, sarampo, gripes (H1N1, H5N1), etc. Exposição de fumaças provenientes de cirurgia a laser e eletrocautério. Poeiras, névoas e fumos, até 10 vezes o limite de exposição ocupacional.

MODO DE USO

Antes de utilizar este respirador, conforme exigência da NR. 6 da C.L.T. e da Instrução Normativa nº 1 do Ministério do Trabalho e Emprego de 11 de abril de 1994, o usuário precisa ser informado pelo empregador sobre a obrigatoriedade de uso do equipamento, ser devidamente treinado, para a correta utilização e ser realizado o ensaio de vedação, para a correta utilização do mesmo.

Abrir a embalagem com técnica asséptica, retirar a máscara da embalagem original e verifique se está em boas condições.



1. De frente para a parte interna da máscara, segure duas alças.
2. Coloque a máscara no queixo e puxe tiras atrás das orelhas para torná-las o mais confortável possível.
3. Coloque o dedo entre o clipe nasal e pressione para dentro enquanto move as pontas dos dedos contornando o nariz de forma que garanta a vedação facial e protegendo as vias respiratórias.
4. Após o uso retire o tirante de uma orelha e em seguida da outra orelha.
5. Faça a remoção, sem tocar a parte externa e descarte de acordo com o procedimento conforme norma vigente.

ADVERTÊNCIAS

Este respirador é indicado, no máximo, para um turno de trabalho. Não deve ser higienizado para não comprometer sua eficácia. Respirador sem manutenção. Se o respirador estiver danificado, sujo ou a respiração se tornar difícil, se sentir tontura, náuseas ou outro mal-estar, deixe a área contaminada, consulte seu supervisor ou responsável e descarte o respirador.

PRECAUÇÕES

Antes de utilizar, avalie se o respirador está em boas condições de uso, verificando a integridade de todas as partes, incluindo o elástico e dispositivo de ajuste. Caso esteja danificado, descarte-o. O descarte deve atender as exigências da RDC N° 222, de 28 de março de 2018 e as demais legislações vigentes em nível federal, estadual e municipal.

CONTRAINDICAÇÕES

Não deve ser utilizado por pessoas com barbas ou cicatrizes profundas que comprometem a área de vedação do respirador. Não utilize este respirador para gases, vapores orgânicos, aerossóis oleosos, jatos de areia e em atmosferas com oxigênio menor que 19,5% em volume.

CONDIÇÕES DE MANUSEIO

Após aberto e utilizado, o produto deverá ser descartado um turno de uso conforme o procedimento da norma vigente. Descartar após o uso. Fabricante recomenda Uso Único.

PRAZO DE VALIDADE

3 (três) anos de fabricação.

Importado e Distribuído por:



Importadora Oficial: Crown Name

- +55 (11) 3809-6870
- comercial.crownname@dorte.com.br
- sac.crownname@dorte.com.br
- dorte.com.br/crownname

NCM:

6307.90.10

REGISTRO ANVISA:

81477120015

CA/MTE:

53.966

FABRICADO POR:

CROWN NAME (WH) UNITED CO., LTD.

**IMPORTADO, DISTRIBUIDO E REGISTRADO POR:**

DORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Importado e Distribuído por:



DISTRIBUIDORA,
IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA.

Importadora Oficial: Crown Name

+55 (11) 3809-6870

comercial.crownname@dorte.com.br

sac.crownname@dorte.com.br

dorte.com.br/crownname